

Basic



ZWITSERSE KWALITEIT



Basic – Chirurgische vacuümpomp

Basic

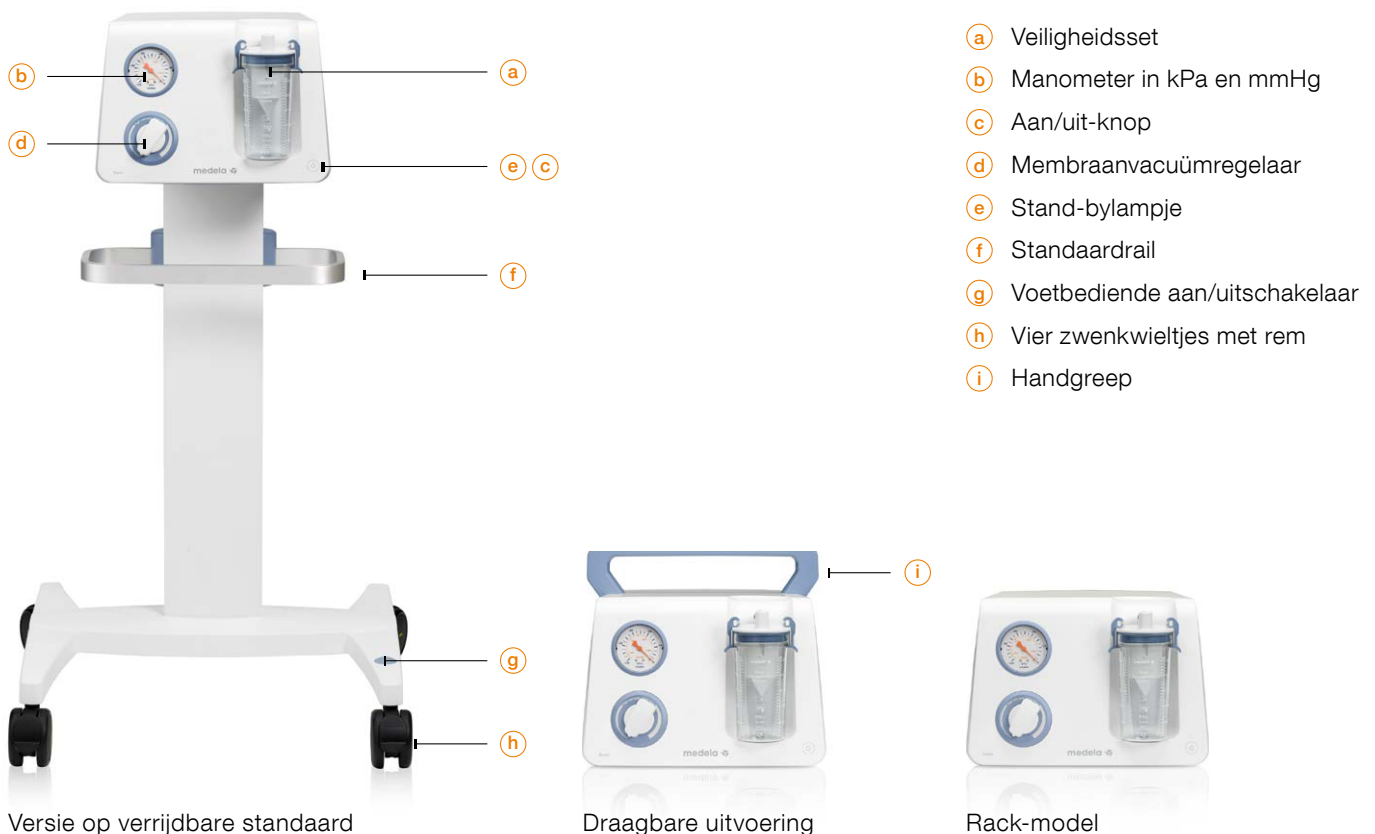
De vacuümpomp met Zwitsers vernuft en gemak

Voor betrouwbare, gemakkelijke en hygiënische vacuümwerking. De Basic is een betrouwbare en gebruiksvriendelijke vacuümpomp voor alle toepassingen in ziekenhuizen, klinieken of dokterspraktijken waarbij een hoog vacuüm nodig is, zoals endoscopie, uitzuigen van de luchtwegen, vacuümbevallingen/keizersnedes en wonddrainage.

Keeping it simple. Bij het ontwikkelen van de Basic vacuümpomp heeft Medela gebruiksgemak centraal gesteld. U kunt de pomp inschakelen met de voetschakelaar aan de standaard of met de knop op de behuizing. Regel het vacuüm met de intuïtieve membraanvacuümregelaar. U kunt het systeem naar wens uitbreiden met optionele accessoires. Dankzij de handige binnenconstructie vereist regulier onderhoud slechts minimale inspanningen, wat kosten bespaart.

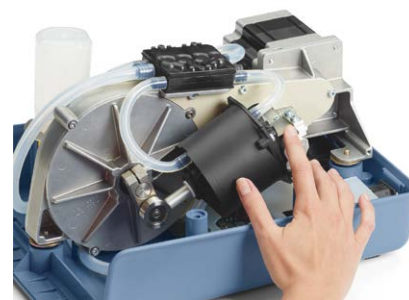
Werkt zoals het moet, wanneer dat moet. Medela's Zwitserse vernuft garandeert de lange levensduur waarom onze pompen bekend staan. Bedrijfskennis, slijtvaste materialen en een intelligente configuratie dragen stuk voor stuk bij aan de betrouwbaarheid van de Basic vacuümpomp.

Aandacht voor hygiëne. Bij het ontwerp en de functionaliteit van de Basic vacuümpomp en de accessoires is veel aandacht besteed aan de hygiëne. Er is met name gekeken naar de plaatsing en het ontwerp van operationele onderdelen, om potentiële besmetting te voorkomen.



Betrouwbaarheid – Zwitserse kwaliteit

Dankzij onze ruim 50 jaar ervaring in de medische vacuümtechnologie konden wij de motoreenheid van de Basic vacuümpomp verder optimaliseren. De in hittebestendige high-techmaterialen uitgevoerde cilinders dragen bij aan een langdurige en betrouwbare werking. Een platte veer met gepatenteerde technologie is slechts één van de vele elementen die in de pomp zijn geïntegreerd.



Hoogwaardige, slijtvaste componenten

Hygiënefactoren

Met zijn gladde afwerking uit één stuk is de buitenzijde van de pomp eenvoudig te reinigen. Er is gekozen voor materialen die tegen desinfecterende middelen kunnen. Met de CleanTouch aan/uit-knop op de behuizing kunt u de pomp simpel in- en uitschakelen. Er zitten geen kieren of groeven in. Met de voetbediende aan/uit-schakelaar op de verrijdbare standaard hebt u de handen vrij voor medische handelingen.



Hygiënische behuizing uit één stuk

Geavanceerde eenvoud

De Medela Basic vacuümpomp is hygiënisch, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. De membraanvacuümregelaar creëert binnen enkele seconden een vacuüm, zodat de Basic vacuümpomp perfect is voor toepassingen waarbij snelle zuigkracht en geruisloze werking gewenst is. De pomp is leverbaar als rack-, draagbaar en standaard model en kan eenvoudig in endoscopiezulen, aan het bed of in de operatiekamer worden geplaatst. De unit kan worden uitgebreid met het disposable of herbruikbare opvangsysteem uit het brede assortiment Medela accessoires.



Alle bedieningselementen bevinden zich aan de voorzijde van de pomp

Voordelen

- De Basic is een betrouwbare, hygiënische en gebruiksvriendelijke vacuümpomp.
- Ons Zwitserse ontwikkel- en productieproces garandeert mechanische precisie voor uitstekende prestaties.
- De slimme constructie en goed toegankelijke interne onderdelen vergemakkelijken het onderhoud.
- Betrouwbaarheid door technologie die aan moderne behoeften is aangepast, met slijtvaste materialen en een kleiner aantal slijtende onderdelen.
- Door de grote keuze aan accessoires ontstaat een compleet systeem dat aan uw individuele behoeften kan worden aangepast.
- 5 jaar garantie.

Accessoires

Disposable opvangsysteem

Hygiënisch, eenvoudig in gebruik en efficiënt vloeistofbeheer met disposable opvangzakken en herbruikbare opvangpotten. Maten: 1,5 en 2,5 liter.



Assortiment slangen

Van siliconen of PVC.



Herbruikbaar opvangsysteem

Autoclaveerbare PSU-opvangpotten en deksels voor eenvoudig en economisch opvangen van afgezogen secreties. Maten: 1, 2, 3 en 5 liter.



Voetbediende vacuüm-regelaar voor handsfree regelen van het vacuüm.

Kan aan standaard Medela opvangpotten worden bevestigd.



Assortiment filters

Om de pomp te beschermen tegen overstromen en de omgeving tegen bacteriën of geurtjes.





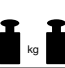
Voetbediende aan/uitschakelaar

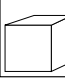

Kabellengte 3,5 m.

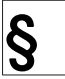





Breid uw Basic pomp uit met Medela accessoires voor nog meer flexibiliteit en gebruiksgemak.

Technische gegevens

	hoog vacuüm - 90 kPa - 675 mmHg
	hoge flow 30 l/min.
	9,3 kg (rack-model)

	HxBxD (rack-model) 210 x 305 x 375 mm
	Stroom 100-240 V

	ISO 9001 ISO 13485 CE (93/42/EEG), IIa	
	5 jaar garantie	

Medical Vacuum Technology for Healthcare Professionals

Neem contact op met ons of met uw lokale Medela-vertegenwoordiger voor meer informatie.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Zwitserland
www.medela.com

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB 's-Hertogenbosch,
Nederland
Tel. 0031-(0)73-6904040
Fax 0031-(0)73-6904044
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be

Lokale contactgegevens: